

FRAMSIDA

Audiogram

Efternamn		Förnamn		Personnummer	
Intervjudatum		Intervju utf. av			
Företag			Tyarbetsplats		
1. Hörselskada i släkten:			7. Hörseluppfattning:		
2. Tidigare bullerarbete:			8. Öronsus:		
3. Militärtjänst:			9. Använt hörselskydd:		
4. Detonationsskador:			10. Ötoskopi:		
5. Öronsjukdomar:			11. Arbetsplatsens buller:		
6. Skallskador:			12. Bullerexp. fritid:		

audiogramblankett HA4

art# 04-010

format A4

1 block = 100 ex

STAFFLING

1 block

2-4 block

5-9 block

10- block

Anteckningar

Mät datum


Mätning utf. av

Skadetal

Mätningen utförd:

- i särskilt mättrum
- i annat ljudscenari
- efter _____ timmar buller
- nattvila
- hörselskydd under arbetspasset före mätning

Anteckningar

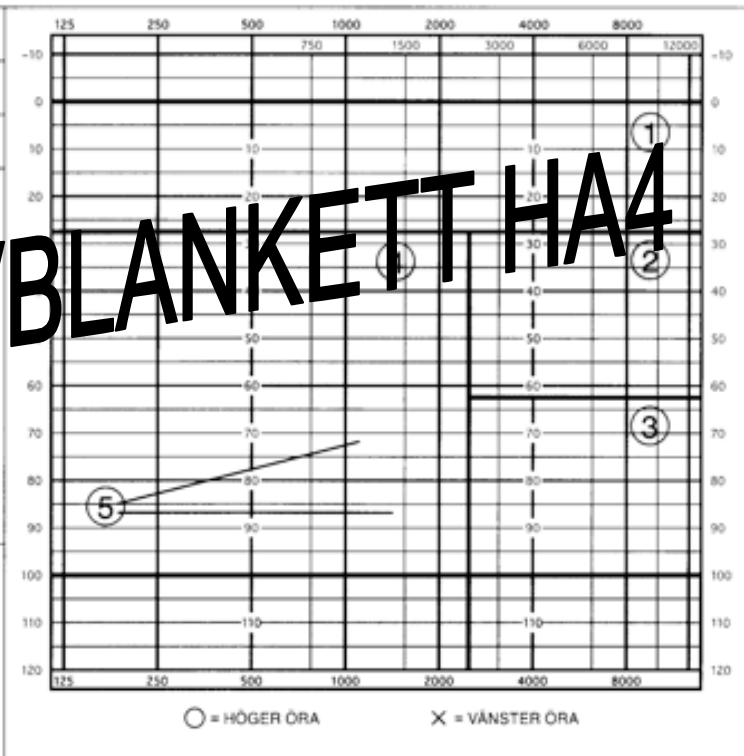

PROVBLANKETT HA4



BAKSIDA

Mätdatum _____


Mätning utf. av _____

Skadetal _____

Mätningen utförd:

- i särskilt mättrum
- i annan tyst lokal
- efter _____ m. utervila
- nattvila
- hörselskydd under arbetspasset före mätning

Anteckningar

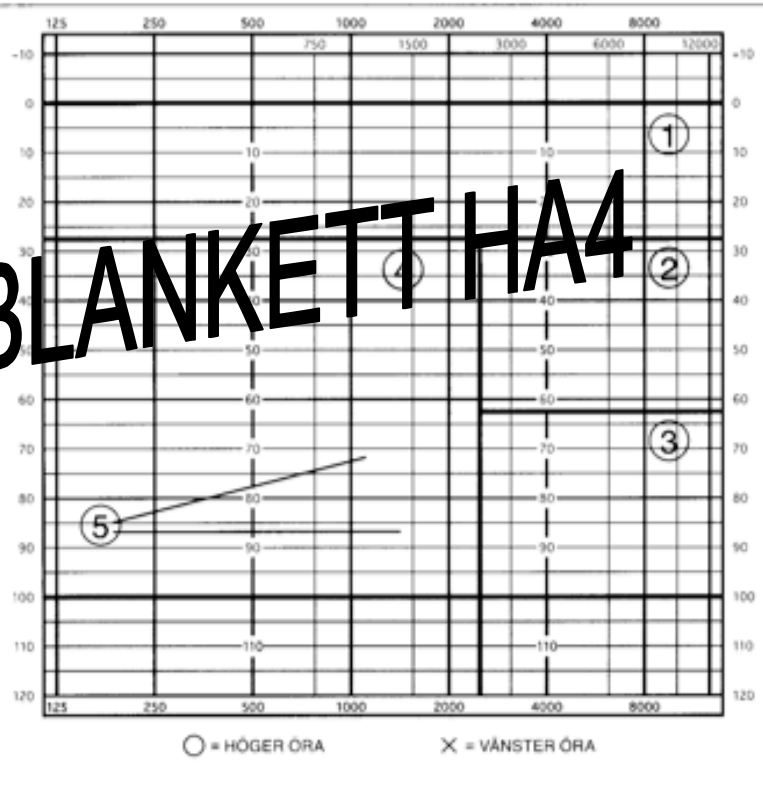

Mätdatum _____


Mätning utf. av _____

Skadetal _____

Mätningen utförd:

- i särskilt mättrum
- i annan tyst lokal
- efter _____ m. utervila
- nattvila
- hörselskydd under arbetspasset före mätning

Anteckningar

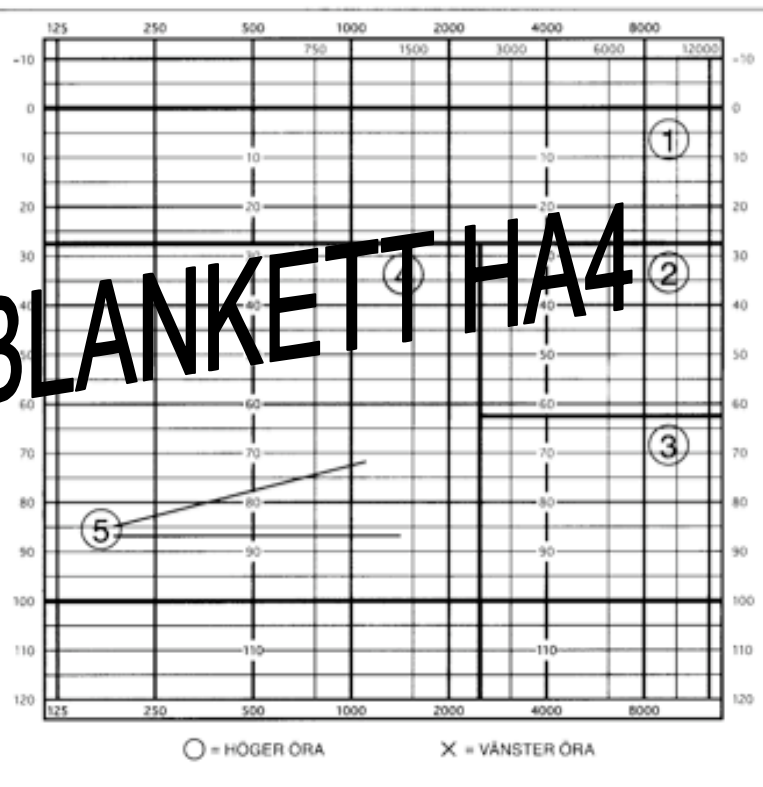

FRÅGEFORMULÄR

METODBESKRIVNING: hörselmätning (audiogram)

Intervju: Som hjälp vid intervjun har vi försökt ge en närmare förklaring till vad frågorna bör omfatta. För in svaren på resp fråga på audiogramblanketten.

- 1 Hörselskada i släkten:** Har patienten hörselskador i släkten? Ange i så fall släktskap och ålder.
- 2 Tidigare bullerarbete:** Har patienten tidigare arbetat i bullriga miljöer? Ange i så fall typ av arbete och hur länge.
- 3 Militärtjänst:** Innebar militärtjänsten bullerexposition, t ex skyttesoldat, pjäsplatstjänst?
- 4 Detonationsskador:** Har patienten varit utsatt för enstaka "smäll" av detonationstyp som givit akuta eller bestående symptom?
- 5 Öronsjukdomar:** Har patienten i barndomen haft upprepade öroninflammationer med brustna trumhinnor? Öronbesvär i vuxen ålder?
- 6 Skallskador:** Kan hörseln ha blivit påverkad av någon traumatisk (yttre våld) skada?
- 7 Hörseluppfattning:** Anser sig patienten höra normalt bra? Hörselbesvär i bullriga miljöer, t ex vid konversation i bil eller stora middagar? Har patienten märkt någon förändring av hörseln?
- 8 Öronsus:** Förekommer öronsus (tinnitus)? Till följd av t ex trötthet, stress eller buller?
- 9 Använt hörselskydd:** Använder patienten hörselskydd i bullrig miljö? I så fall vilken typ?
- 10 Otskopi:** Titta före hörselmätningen i patientens båda öron. Finns hinder i hörselgången?
- 11 Arbetsplatsens buller:** Tycker patienten att arbetsplatsen har öronbedövande buller?
- 12 Bullerexp, fritid:** Bullerexposition, t ex jakt, fritidsskytte, motorsåg eller annan bullerexposition på fritiden.

Kurvan: Hörselmätningen skall ske på minst sex frekvenser, 500 Hz t o m 6000 Hz, vilket räcker för nedan beskrivna klassifikation.

Bullervila: Patient som arbetar i buller skall under arbetspasset före mätningen bära hörselskydd på vanligt sätt.

Skadetal: På blankettens kurvruta finns hjälplinjer för en enkel klassificering i 2-siffrigt skadetal enligt **Klockhoff**. Om Du kan utföra klassificeringen med denna metod, så noterar Du skadetalet på blanketten. Nedan följer en förklaring till siffrorna.

Siffror 1: frihet från hörseldefekt

Siffror 2: diskantnedsättning på 4000-6000 Hz, mestadels symptomfri

Siffror 3: med utbredd diskantnedsättning ovanför 2000 Hz. Ger uppfattningssvårigheter i störda miljöer

Siffror 4: mycket utbredd diskantnedsättning även på frekvens lägre än 2000 Hz, mer eller mindre utpräglade symptom på hörselnedsättning

Siffror 5: hörselnedsättning - jämfördelat eller med tyngdpunkten i basen - av varierande orsaker, bl a mellanörefel alternativt felmätning eller remiss till specialist

Blankett och metodbeskrivning har utarbetats av:

Arbetskyddstyrelsen (Siv Törnqvist) och **C A Tegnér AB** (Ulf Tegnér) i samarbete.

Forskningsavdelningen

Box 20003

171 84 SOLNA

161 02 BROMMA

tel 08-730 90 00

tel 08-564 822 00

Blanketten beställs hos C A Tegnér AB